

UP&DO
DENTAL HUB

UNIVET



КАТАЛОГ
Останні оновлення

See
Beyond *the*
Ordinary



ВИХОДЬТЕ ЗА МЕЖІ ЗВИЧНОГО РАЗОМ З UNIVET

У Univet zip — це більше, ніж просто здатність бачити. Це сила, що змінює підхід і розширює межі можливого. Завдяки італійській майстерності та інноваційним технологіям ми переосмислюємо, як стоматологи бачать і працюють.

Наші бінокляри підвищують ефективність, поєднуючи передові технології, ергономічну досконалість та італійський стиль.
У стоматології точність — це все, і ми забезпечуємо чіткість, яка дозволяє бачити за межами звичного.

UP&DO

DENTAL HUB

Up&Do більше 20 років є офіційним представником інноваційних продуктів міжнародних виробників з доведеними хірургічними та естетичними результатами.

Наша перевага — надання відмінного сервісу та бази знань.

Висококваліфікована команда та портфель брендів спрямовані на реалізацію потреб лікарів та їх професійного зростання.



Ми працюємо щоб ви могли займатися улюбленою справою!



MADE IN ITALY EXCELLENCE



СПРАВЖНЯ ІТАЛІЙСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ — ВІД ІДЕЇ ДО ГОТОВОГО ВИРОБУ.

У Univet кожна пара бінокулярів із гордістю виготовляється в Італії та на 100% розробляється всередині компанії. Такий підхід гарантує повний контроль над усім виробничим процесом — від ідеї до втілення — забезпечуючи найвищу якість, бездоганну увагу до деталей і впізнану італійську майстерність. Наша команда дизайнерів та інженерів тісно співпрацює, створюючи інноваційні рішення, що відповідають змінним потребам стоматологів у всьому світі.

Маючи експертизу в оптичних технологіях для медичної, промислової та тактичної сфер, Univet забезпечує безкомпромісну якість для стоматологів і лікарів у всьому світі. Наші продукти гарантують чітке зображення, правильну поставу та високу продуктивність, допомагаючи вам досягати найкращих результатів щодня.



КОЕФІЦІЄНТ ЗБІЛЬШЕННЯ



0 X

Видимість
«неозброєним» оком




2.0 X

Доступно для
лінз Галілея




2.5 X

Доступно для
лінз Галілея

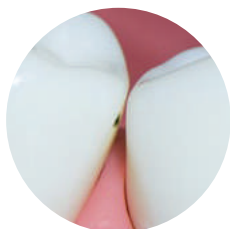


3.0 X

Доступно для
лінз Галілея

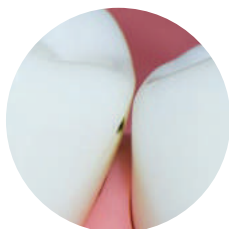


3.5 X

Доступно для лінз Галілея,
Призматичних та Ergo

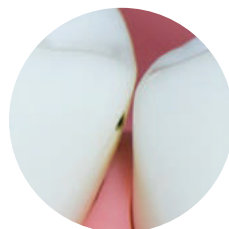


4.0 X

Доступно для
Призматичних лінз

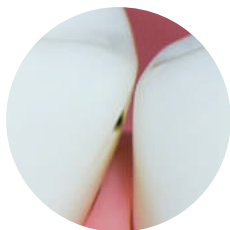

4.5 X

Доступно для
лінз Ergo

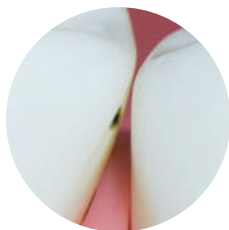

5.0 X

Доступно для
Призматичних лінз



5.7 X

Доступно для
лінз Ergo



ВИСОКА ЯКІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Univet пропонує широкий вибір біноклярів, адаптованих до потреб різних спеціалістів. Кожна модель створена для досягнення ідеального балансу між збільшенням, комфортом і стилем — для бездоганної роботи без компромісів.



НАШІ РІШЕННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ПОТРЕБИ



Prismatic

СИСТЕМА ЛІНЗ ПРИЗМАТИЧНА

Бінокляри Univet Prismatic **XS ULTRA-HD** спроектовані для забезпечення чіткої візуалізації найдрібніших деталей. Вони виводять вашу роботу на новий рівень завдяки надзвичайній деталізації.

У сегменті призматичних систем збільшення, лінзи **XS ULTRA-HD** встановлюють нові стандарти роздільної здатності та точності по всьому полю зору. **Це чудовий вибір для стоматологів і хірургів, які потребують великого збільшення** — для максимальної чіткості й точності під час делікатних процедур.



Galileo

СИСТЕМА ЛІНЗ ГАЛІЛЕО

Системи збільшення Univet Galilean **PRO HD** забезпечують високу якість оптики, широке поле зору та глибоку різкість по всій площині — при цьому залишаючись легкими й зручними у використанні. Це інтуїтивно зрозумілі та надзвичайно універсальні бінокляри.

Galilean PRO HD — ідеальне рішення для стоматологів, гігієністів, лікарів, ветеринарів та всіх, кому потрібне широке поле зору з **чітким сприйняттям простору без втрати деталізації** — без жодних компромісів у якості зображення

НОВА ОПТИКА



New PRO HD²

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ 3,5-КРАТНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ В СИСТЕМІ ГАЛІЛЕО

Ми переосмислили поняття досконалості з ProHD² — новою галілеївською системою збільшення 3.5х, яка поєднує відмінну оптичну якість Univet з неперевершеною універсальністю, забезпечуючи бездоганну якість зображення.

- > На 15% ширше поле зору — для більш повного та деталізованого огляду.
- > Вдосконалена HD-оптика — кришталево чисте зображення та виняткова деталізація
- > Максимальний комфорт і легка конструкція — ідеально для тривалого використання без втоми
- > Ідеальна адаптивність — легко підлаштовується під ваші професійні потреби

ERGO ADVANCED

ПІДВИЩЕНИЙ КОМФОРТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



Бінокляри ERGO Advanced — це інноваційне рішення, створене для забезпечення найвищого рівня ергономіки та чіткого, стабільного зображення під час роботи. Вони зменшують втому й запобігають тривалому фізичному навантаженню, забезпечуючи комфорт навіть під час тривалої роботи.

ОПТИЧНА СИСТЕМА З ВІДБИТТЯМ ЗОБРАЖЕННЯ UNIVET

Завдяки покращеній роздільній здатності та підвищеній яскравості ця система покращує розпізнавання кольорів і її адаптацію людським оком, що в підсумку підвищує вашу продуктивність.

Бінокляри ERGO Advanced — ідеальне рішення для професіоналів, які виконують делікатну роботу впродовж тривалого часу. Вони забезпечують неперевершений комфорт і виняткову оптичну чіткість.



ПЕРЕВАГИ

ERGO ADVANCED OPTICS



ЧАС АДАПТАЦІЇ

Завдяки усуненню потреби працювати в неприродній «позиції солдата», фахівці можуть швидко адаптуватися до використання біноклярів без суттєвих перешкод у робочому процесі.

ПРИРОДНИЙ НАХИЛ ШИЇ

Оптична система ERGO Advanced забезпечує яскраве, чітке зображення без спотворень по краях і хроматичних аберацій, що суттєво перевершує якість зображення у звичайних оптичних системах.

ВАГА

Оптика ERGO Advanced на 20% легші за призматичну оптику, що робить їх більш практичним і зручним варіантом для тривалого використання.

ЧІТКІСТЬ НА БУДЬ-ЯКІЙ ВІДСТАНІ

ERGO Advanced забезпечує унікальні оптичні характеристики, що дозволяють чітко бачити як на близьких, так і на середніх відстанях, підвищуючи універсальність для професійного використання



ПРИРОДНИЙ
НАХИЛ ШИЇ



ПРОСТИЙ У
ВИКОРИСТАННІ



ШИРШЕ ПОЛЕ
ЗОРУ



ПІДВИЩЕНА ЯСКРАВІСТЬ
ЗОБРАЖЕННЯ



ПЕРИФЕРІЙНИЙ ЗІР



ЛЕГКА ОПТИЧНА
КОНСТРУКЦІЯ





ЗБІЛЬШЕННЯ

Збільшення	Галілео	Призматична (Кеплера)	Ergo Advanced
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Оправа	Галілео	Призматична (Кеплера)	Ergo Advanced
 ITA Endura Brown			 not available
 ITA Midnight Blue			 not available
 ITA Green Vespa			
 ITA Black Edition			 not available
 ITA Limited Edition	 not available	 not available	



ITA

М'які, плавні лінії відсилають до класичних форм, переосмислених за допомогою сучасних матеріалів і вишуканої обробки. Цей позачасовий дизайн виходить за межі швидкоплинних трендів, гарантуючи елегантність, що ніколи не втрачає актуальності.

СТВОРЕНІ ДЛЯ КОЖНОГО

Тепер доступні у двох версіях — Regular та Extended Fit — наші оправы ITA розроблені для максимального комфорту кожного професіонала. Ми прагнемо забезпечити ідеальну посадку, враховуючи індивідуальні особливості та вподобання користувачів.



ONE

ОНОВЛЕНЕ ПОКРИТТЯ

SIZE

55 □ 14 - звичайна посадка



DESIGN
AWARD
WINNER



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2018



DESIGN
AWARD
2017



reddot winner 2016



ЗБІЛЬШЕННЯ

Збільшення	Галілео	Призматична (Кеплера)	Ergo Advanced
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Оправа	Галілео	Призматична (Кеплера)	Ergo Advanced
ONE Desert Sage			
ONE Black Edition			



ONE

Унікальна за своєю легкістю та міцністю, модель ONE вирізняється вишуканим стильним та дизайном Univet. Створена для безперебійної роботи, вона тепер представлена у новому виконанні Black Edition — з виразною та сучасною естетикою. Завдяки регульованій дужці та знімній ущільнювальній вставці модель ONE забезпечує максимальний захист очей без компромісів у комфорті та стилі.





ЗБІЛЬШЕННЯ

 Збільшення	 Галілео	 Призматична (Кеплера)	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X			
4.0 X			
4.5 X			
5.0 X			
5.7 X			

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

 Оправа	 Галілео	 Призматична (Кеплера)	 Ergo Advanced
		 not available	 not available
Look / Cool Ruby			
		 not available	 not available
Look / Cool Emerald			



Look & Cool

Оправи Look & Cool зберігають
впізнаваний стиль Univet.

Виготовлені вручну з лакованого нейлону,
з металевими вставками, вони поєднують легкість
і вишуканість. Створені для чоловіків та жінок
ці оправи забезпечують ідеальний баланс комфорту,
функціональності та преміальних матеріалів —
стильне та практичне рішення
для щоденного використання.





ЗБІЛЬШЕННЯ

Збільшення	Галілео	Призматична (Кеплера)	Ergo Advanced
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Оправа	Галілео	Призматична (Кеплера)	Ergo Advanced
ASH Dark Carbon Red			
ASH Purple Carbon			
ASH Grey Carbon			



ASH

Безкомпромісна увага до преміальних матеріалів і пошук нових форм, ліній та пропорцій через переосмислення наших найвідоміших моделей робить ASH по-справжньому сучасним дизайнерським рішенням.





ЗБІЛЬШЕННЯ

 Збільшення	 Галілео	 Призматична (Кеплера)	 Ergo Advanced
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

 Оправа	 Галілео	 Призматична (Кеплера)	 Ergo Advanced
			
TECHNE Black Green			
			
TECHNE White Red			
			
TECHNE White Pink			
			
TECHNE Black Edition			
			
TECHNE Limited Edition			



TECHNE

Завдяки винятковому дизайну оправи **TECHNE** вирізняється надзвичайною легкістю та високим рівнем комфорту. Ця функціональна й універсальна модель ідеально балансує між стилем і практичністю, що робить її оптимальним вибором для професіоналів, які потребують комфорту протягом усього дня без компромісів у продуктивності.

ГОТОВЕ РІШЕННЯ

Quick Loupes

Максимально зручні у використанні, Quick Loupes створені для щоденної практики — з попередньо налаштованими міжзіничними відстанями, які легко підібрати під ваші індивідуальні параметри. Доступне рішення для тих, хто цінує комфорт і точність без зайвих налаштувань.

РОЗМІР

66 □ 15 - Стандартна посадка / Розширена посадка



Headgear (ГОЛОВНИЙ ОБРУЧ)

Розроблене для рівномірного розподілу навантаження — забезпечує комфорт і точне налаштування за допомогою системи мікрорегулювання.

РОЗМІР

Регульована посадка



Air-X

Універсальні бінокляри із захисним екраном, які можна носити поверх коригувальних окулярів. Оснащені знімним і змінним екраном, а також регульованою оптикою за висотою та кутом нахилу.

SIZE

66 □ 15 - Звичайна посадка





DESIGN
AWARD
WINNER
2021



reddot winner 2020



АСЕПТИЧНИЙ
КОНТРОЛЬ



СЕНСОРНЕ
КЕРУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ

Сумісність із синім світлом
Колірна температура: 5700 K
Brightness: 38000 люкс
Час роботи від батареї: 140 хв
Вага ліхтаря: 36 г

ФОРМА СВІТЛОВОЇ ПЛЯМИ

Ø (см)	люкс
7,5	38000

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

2 батареї з подвійним зарядним пристроєм
Універсальний магнітний адаптер
UV 525 1м Композитний фільтр

НЕОБОВ'ЯЗКОВО

Спеціальний магнітний адаптер (тільки для Univet TTL Loupes)

PERFORMANCE EXCELLENCE

Щоб доповнити наші бінокляри, ми створили лінійку преміальних LED-систем освітлення. Ці потужні джерела світла забезпечують бездоганну рівномірність освітлення у всьому полі зору — для впевненості та точності навіть у найвимогливіших клінічних умовах.



ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ



CRI 70

ОСОБЛИВОСТІ

Голосове керування Alexa
Сумісність із синім світлом
Колірна температура: 5700 K
Яскравість: 38000 люкс
Час роботи від батареї на
максимальній яскравості: 18 год
Вага ліхтаря: 10,5 г

ФОРМА СВІТЛОВОЇ ПЛЯМИ

Ø (см)	люкс
10,5	38000

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Універсальний магнітний адаптер
UV 525 1m Композитний фільтр

НЕОБОВ'ЯЗКОВО

Зарядний пристрій
Спеціальний магнітний адаптер (тільки для Univet TTL Loupes)



ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ ALEXA

Завдяки інтеграції з Amazon Alexa, система Lynx підтримує голосове керування, дозволяючи працювати безконтактно — зручно, сучасно та без зайвих рухів.



ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ



CRI 90

ОСОБЛИВОСТІ

Голосове керування Alexa
Сумісність із синім світлом
Колірна температура: 5700 K
Яскравість: 50000 люкс
Час роботи від батарей на
максимальній яскравості: 9 год
Вага ліхтаря: 15 g

ФОРМА СВІТЛОВОЇ ПЛЯМИ

Ø (см)	люкс
8,3	50000

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Універсальний магнітний адаптер UV 525 1m
Композитний фільтр

НЕОБОВ'ЯЗКОВО

Зарядний пристрій
Спеціальний магнітний адаптер (тільки для Univet TTL Loupes)

works
with



ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ ALEXA

Завдяки інтеграції з Amazon Alexa, система Lynx підтримує голосове керування, дозволяючи працювати безконтактно — зручно, сучасно та без зайвих рухів.




ГЛОСАРІЙ

РОБОЧА ВІДСТАНЬ

— відстань між очима лікаря та об'єктом під час роботи (від очей лікаря до робочої зони (у стоматології — до рота пацієнта), оптимізована під зріст та положення тіла.

Визначається з урахуванням зросту та позиції лікаря, впливає на ергономіку та стан ший/спини.

Оптимальна робоча відстань допомагає уникати надмірного згинання ший.

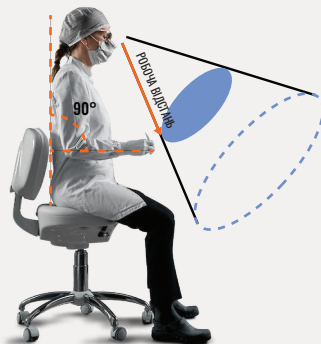

ПОЛЕ ЗОРУ

— максимальна видима зона під час роботи через бінокляри (частина робочої області, яку можна одночасно бачити й утримувати у фокусі через бінокляри).

Має бути достатнім для комфортного виконання процедури.

Поле зору залежить від коефіцієнта збільшення та робочої відстані:

- менше збільшення — більше поле зору;
- більше збільшення — менше поле зору.




ГЛИБИНА ПОЛЯ (ГЛИБИНА РІЗКОСТІ)

— діапазон, у межах якого зображення залишається чітким під час роботи через бінокляри.

Залежить від коефіцієнта збільшення та робочої відстані:

- менше збільшення — більша глибина поля;
- більше збільшення — менша глибина поля.

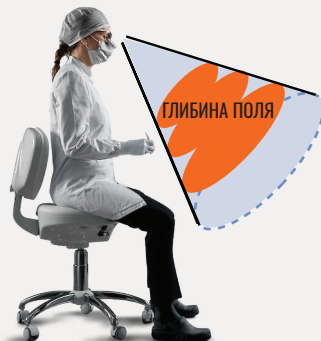



КРАТНІСТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ

— показник, у скільки разів бінокляри візуально наближають об'єкт. Наприклад, збільшення 3× означає, що об'єкт виглядає у три рази більшим, ніж без оптики.

Не слід плутати з **діоптріями** — одиницями вимірювання оптичної сили лінз, які коригують зір.


- Діоптрії призначені для компенсації порушень зору (короткозорість, далекозорість, астигматизм).
- Кратність збільшення визначає масштаб зображення, але не впливає на корекцію зору.



КУТ НАХИЛУ

— кут, під яким користувач дивиться через бінокляри на робочу зону. Визначає положення шиї під час роботи та є ключовим показником ергономіки.

- Правильний кут нахилу дозволяє дивитися в оптику без суттєвого нахилу шиї, зменшуючи навантаження на спину.
- Чим більший (крутіший) кут нахилу, тим менше потрібно згинати шию, але надмірно крутий кут може спричиняти напруження очей і м'язів.
- Оптимальний кут — максимально крутий, за якого не виникає дискомфорту.

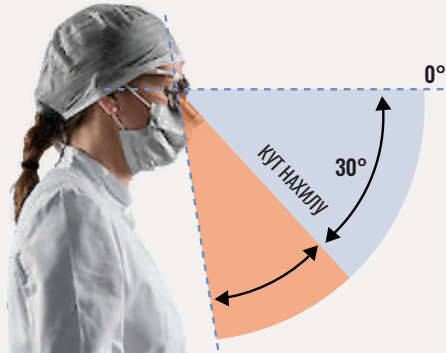

TTL (THROUGH THE LENS)

— бінокляри, у яких оптика вмонтована прямо в лінзи оправ. Це робить їх легшими, зручнішими та забезпечує стабільне зображення без зміщень.

FLIP-UP

— бінокляри з підйомним механізмом: можна швидко підняти або опустити оптику, не знімаючи оправу.

АБЕРАЦІЯ

— оптичний «дефект», коли по краях зображення з'являються кольорові обідки, і картинка виглядає менш чіткою.

See
Beyond *the*
Ordinary

UNIVET

UP&DO
DENTAL HUB

🏠 +38 067 180 66 39

📍 Київ, проспект Лобановського 6а, 26-й поверх

💻 up-and-do.com

Discover
more

